



Špeciálne vyhlásenie: Všetok obsah v tomto dokumente bol starostlivo overený. Ak sa v obsahu vyskytnú tlačové chyby alebo nejasnosti, naša spoločnosť si vyhradzuje právo na konečnú interpretáciu.

Okrem toho, ak dôjde k technickým vylepšeniam produktu, budú zahrnuté v novej verzii manuálu bez predchádzajúceho upozornenia. Ak dôjde k zmenám vzhľadu alebo farby produktu, platí skutočný produkt nachádzajúci sa vo vnútri balenia.

V súlade s národnými normami: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Výrobca: NEDES, s.r.o.


Adresa: Hlavná 35, 919 21 Zeleneč, Slovakia



EPIC X10

Luxusné Masážne Kreslo

Návod na používanie

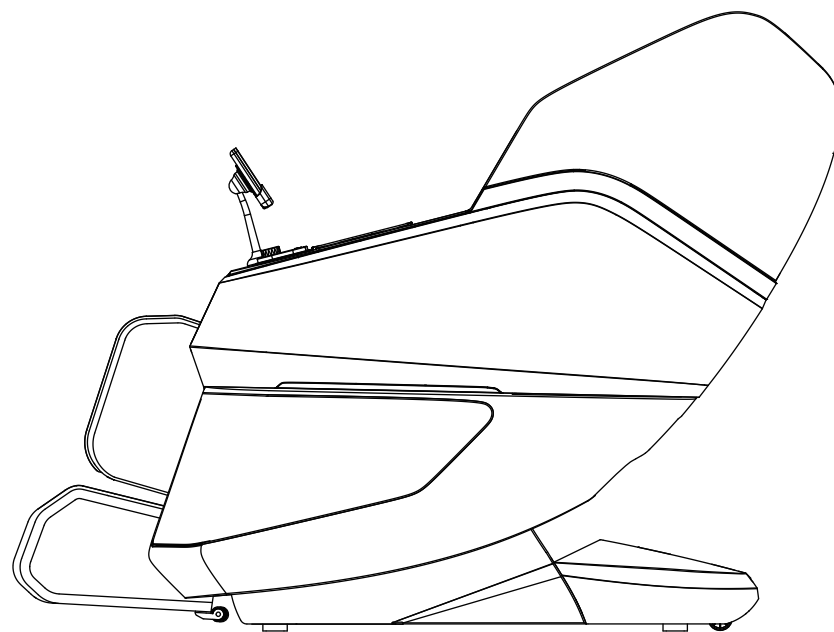

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt, pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte obsah tohto manuálu.

Manual + more informations on
Handbuch + weitere Informationen zu
Návod + viac informácií na
Návod + více informací na
Kézikonv + további információ
Instrukcje + więcej informacji
Instrucțiuni + Mai multe informații la



www.nedes.eu

Obsah



akujeme, že ste zakúpili toto masážne kreslo. Pred použitím si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod, najmä sekciu o bezpečnosti, aby ste správne používali toto masážne kreslo. Po prečítaní si tento návod uschovajte na bezpečnom mieste a v prípade potreby sa naň odvolávajte.

I Bezpečnostné pokyny	1-2
II Pred každou masážou	3
III Špecifikácia produktu	4
IV Riešenie problémov	4
V Inštalácia produktu	5-6
VI Údržba a spôsoby skladovania	7
VII Pripojenie Bluetooth na prehrávanie hudby	8
VIII Popis jednotlivých častí	9
IX Ovládací panel	10
X Pokyny na obsluhu masážneho kresla	11-12




Vylepšenia a zmeny dizajnu a funkcií môžu byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím, pozrite si skutočný produkt.

I Bezpečnostné pokyny

Upozornenie



	Nepoužívajte napájanie mimo uvedeného napätia, aby ste predišli elektrickému skratu alebo poruche.
	Ak sú napájací kábel a zásuvka poškodené alebo je zásuvka uvoľnená, okamžite prerušte používanie, aby ste predišli elektrickému skratu alebo poruche.
	Aby ste predišli úrazom alebo nehodám, odporúča sa, aby osoby, ktoré sa nevedia vyjadriť alebo samostatne ovládať prístroj, nepoužívali tento masážny prístroj.
	Nenechávajte deti používať alebo sa hrať na prístroji a nesedajte ani nestojte na opierke chrbta, opierke rúk alebo opierke nôh.
	Kábel nesmie byť zlomený, skrútený, natiiahnutý, uzlený alebo silne stlačený (najmä nie pod prístrojom). Zakazuje sa krútiť a skladovať príslušenstvo, ako sú vankúše na masážne kreslá, pretože by to mohlo spôsobiť skrat a elektrickú poruchu.
	Neumiestňujte do vlhkých miest, ako sú kúpeľne, aby ste predišli elektrickému skratu, poruchám a hrdzaveniu.

Pozor




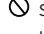


	Predvolený čas používania každého programu je do 15 minút. Ak potrebujete predĺžiť alebo skrátiť čas používania, môžete to urobiť pomocou časových operácií. Odporúča sa nemasírovať rovnakú časť tela dlhšie ako 15 minút. Dlhodobé používanie môže spôsobiť svalovú bolesť. (Odporúčanie) Čas používania za deň by mal byť kontrolovaný do 60 minút.
	Ak sa počas používania objavia akékoľvek nezvyčajné pocity alebo abnormality v tele, okamžite prestaňte používať.
	Overte, či je prevádzkový spínač a funkcia resetovania v správnej prevádzke, aby sa predišlo nehodám alebo zraneniam.
	Po dlhšom používaní je potrebné overiť, či masážne kreslo funguje správne pred jeho ďalším použitím.
	Pri výpadku prúdu je potrebné okamžite vypnúť napájanie a vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky, aby sa predišlo nehodám pri opätovnom zapnutí.
	Keď sa zariadenie nepoužíva, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a umiestnite zástrčku minimálne 30 cm nad zem, aby ste predišli starnutiu izolácie spôsobenému prachom a vlhkosťou, čo môže viesť k úniku elektriny.
	Pri masáži rúk je potrebné odstrániť tvrdé predmety, ako sú hodinky a šperky, aby sa predišlo úrazom alebo zraneniam.
	Počas používania nezaspíte. Nevedomé používanie môže spôsobiť nepohodlie alebo zranenie tela.
	Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa, ako sú sporáky, nefajčite počas používania a nepoužívajte na vykurovacích zariadeniach, ako sú elektrické deky, aby ste predišli vzniku požiaru.
	Nepoužívajte bezprostredne po jedle, aby ste predišli nepríjemnostiam.
	Nepoužívajte po konzumácii alkoholu, pretože to môže viesť k nehodám alebo zraneniam.
	Nepoužívajte masážne kreslo viac ako dvaja ľudia súčasne, aby sa predišlo poruchám alebo zraneniam.
Nepoužívajte na holú pokožku, priame masírovanie pokožky môže spôsobiť bolesť v dôsledku intenzity.	
Nesadajte si ani nevstávajte v pozícii, keď sú nohy zdvihnuté a je prísne zakázané stáť na masážnej časti nôh, keď poloha ešte nie je úplne vertikálna, aby sa predišlo nehodám alebo zraneniam.	

I Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím si, prosím, dôkladne prečítajte tieto „Bezpečnostné pokyny“ na správne používanie.
- Tieto pokyny sú zamerané na bezpečné a správne používanie produktu a prevenciu škôd alebo zranení iných osôb.
- Na označenie úrovne nebezpečenstva alebo poškodenia sú pokyny rozdelené na „Varovanie“ a „Opatrenia“. Obe kategórie obsahujú dôležité bezpečnostné informácie, preto ich, prosím, dodržiavajte.

	Upozornenie	Pri nesprávnom použití sa predpokladá, že môže vzniknúť potenciálne riziko zranenia používateľa.
	Pozor	Pri nesprávnom použití sa predpokladá, že môže vzniknúť potenciálne riziko zranenia používateľa alebo poškodenia zariadenia.

Symbols

	 Symboly označujú obsah s varovaniami a upozorneniami (Príklad naľavo označuje všeobecné varovania a upozornenia)
	 Symbol znamená zakázané správanie. Konkrétne pokyny sú uvedené na obrázku (príklad: demontáž je zakázaná na ľavom obrázku).
	 Symboly označujú, čo je povinné alebo odporúčané. Konkrétne pokyny sú uvedené na obrázku (príklad: odpojenie od elektrickej zásuvky je znázornené na ľavom obrázku).

Po prečítaní si návodu, prosím, uložte na bezpečné miesto, kde k nemu budete mať kedykoľvek prístup.

Osobám nevhodné používanie tohto produktu: Ak máte niektorý z nasledujúcich symptómov, prosím, poraďte sa so svojím lekárom a používajte produkt iba pod lekárskej dohľadom.

Upozornenie

Osoby používajúce lekárske elektronické zariadenia, ako sú kardiostimulátory, ktoré sú implantované v tele.

Osoby, ktoré sú liečené lekárom, najmä ak pociťujú abnormality v tele.

Pacienti s malignými nádormi, akútnymi ochoreniami, srdcovými chorobami, ťažkou hypertenziou atď. (Vyžaduje sa ľudský dohľad)

Tehotné ženy alebo osoby v období menštruácie.

Osoby s osteoporózou, pacienti s fraktúrami stavcov.

Osoby s kožnými poraneniami, ktoré potrebujú pokojný čas na zotavenie.

Osoby s telesnou teplotou nad 38 stupňov (v období horúčky).

Produkt sa zahrieva, a preto je potrebná opatrnosť pri používaní u osôb, ktoré nie sú citlivé na teplo. (Vyžaduje sa ľudský dohľad)

Mentálne postihnutí jedinci alebo maloletí musia používať produkt pod dohľadom.

II Pred každou masážou

Zapnite napájanie

1. Pred použitím skontrolujte, či napätie uvedené na napájacom kábli zodpovedá podmienkam používania, a či je na konci elektrickej zásuvky pripojený uzemňovací drôt.

2. Zapnite hlavný vypínač.

Hlavný vypínač sa nachádza na spodnej strane zadnej časti. Po zapnutí napájania sa rozsvieti indikátor vypínača.

TIPY

Ak používate masážne kreslo v chladnom prostredí, neodporúčame náhle zvyšovať teplotu miestnosti. Odporúčame postupné zvyšovanie teploty na normálne úrovne. Ak je masážne kreslo umiestnené na chladnom mieste a následne presunuté na teplé miesto, odporúčame ho používať až po hodine od presunu. Pri okamžitom použití môže dôjsť k poruche masážneho kresla.

Kontrola pred používaním

1. Skontrolujte okolie


① Uistite sa, že v okolí masážneho kresla, vrátane zadnej časti, prednej časti, spodnej časti nôh atď., nie sú žiadni ľudia, domáce zvieratá ani predmety. (Režim pohotovosti)

2. Skontrolujte stav masážneho kresla

① Pred použitím prosím zdvihnite zadný vankúš a skontrolujte, či nie sú časti operadla a iné časti látky poškodené. Ak je zistené poškodenie (aj keď je malé), okamžite prestaňte zariadenie používať, odpojte ho od napájania a požiadajte o opravu.

② Skontrolujte, či napájací kábel, kábel displeja na ovládanie alebo iné predmety nie sú zaseknuté v masážnom kresle.

③ Uistite sa, že napájací konektor je úplne zasunutý do zásuvky, a nedovoľte, aby sa na napájací konektor dostali kovové časti alebo prach, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo skratom.

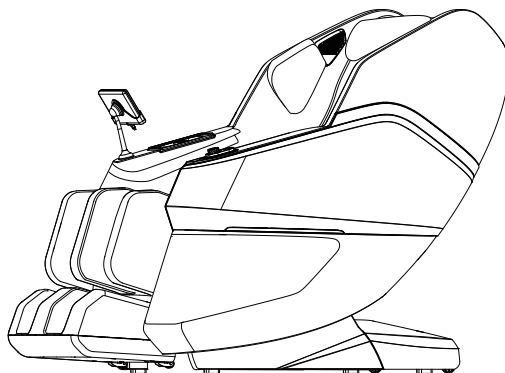

III Špecifikácia produktu

Názov	Massage Chair
Product Model	X10
Váha N./Váha B.(Kg)	84Kg/101Kg
Napätie	120W
Napájanie	220-240V~
Odporúčaná čas	15min
Odporúčaná frekvencia	50-60Hz
Veľkosť vonkajšieho balenia	1770*780*892.5mm
Veľkosť v zvislej polohe	1550*785*1150mm
Veľkosť v naklonenej polohe	1650*785*870mm

IV Riešenie problémov

Ak nastane neobvyklá situácia, aby ste predišli nehodám, prestaňte výrobok používať a odpojte ho od napájania.

Ak nasledujúci spôsob riešenia problémov nefunguje, kontaktujte servisné stredisko.

Možné závady	Riešenie
Zvuk počas prevádzky	Zvuk vychádzajúci zo štruktúralného dizajnu nemá žiadny vplyv na funkciu.
Konektor je zapojený do elektrickej zásuvky, ale masážne kreslo nefunguje.	1. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený a či je zapnutý prúd. 2. Skontrolujte, či je vypínač na masážnom kresle v polohe "I" 3. Keď je vypínač v polohe „I“, svetlo na spínači by malo svietiť červeno. Ak nesvieti, odpojte napájací kábel, skontrolujte držiak poistky a poistkovú trubicu, či sú na svojom mieste.
Počas používania sa dá ovládať diaľkový ovládač, ale masážne kreslo nereaguje.	Po dlhšom používaní, ak teplota masážneho kresla stúpne príliš vysoko, masážne kreslo sa automaticky prepne do režimu ochrany proti prehriatiu. Prosím, vypnite napájanie a dočasne ho nepoužívajte 30 až 60 minút, aby sa umožnilo vnútorné ochladenie zariadenia.
Počas používania, ak je možné ovládať ovládač a masážne kreslo prestane fungovať	Po aktivovaní automatickej časovačovej funkcie, ak uplynie nastavený čas, prosím, stlačte tlačidlo znova na ovládanie.


V Inštalácia produktu

Nastavenie masážneho kresla

V okolí kresla by mal byť ponechaný priestor a kreslo by malo byť umiestnené na rovnej ploche.

Tip: Keď sú nohy zdvihnuté, sklopte operadlo, aby ste sa vyhli kolíziám. Vpredu by ste mali nechať viac ako 19 cm a vzadu viac ako 8 cm voľného priestoru.


Tip: Odporúča sa položiť pod masážne kreslo podložku, aby sa predišlo poškodeniu podlahy alebo koberca. Vyhnite sa umiestneniu na miesta s dlhodobým vystavením slnečnému žiareniu, vykurovacím zariadeniam a iným vysokoteplotným miestam v blízkosti, aby nedošlo k zafarbeniu alebo zhoršeniu kvality koženého potahu.

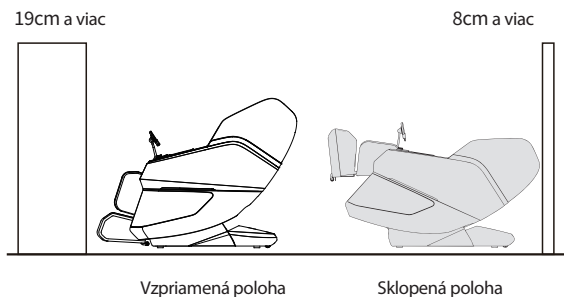

Presun masážneho kresla

Zdvihnite prednú časť masážneho kresla a posuňte ho ručne.

Upozornenie: Premiestňujte kreslo iba samotné kreslo, aby ste predišli prevráteniu. Neťahajte alebo neposúvajte kolieska po podlahách, ktoré sú náchylné na poškriabanie. Pri premiestňovaní nezdvíhajte sedaciu časť a nohy kresla. Pri zdvíhaní masážneho kresla venujte pozornosť prednej časti.

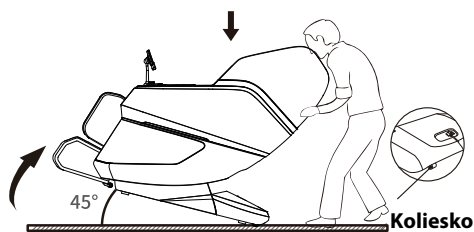

V Inštalácia produktu

Vyberte masážne kreslo a príslušenstvo z krabice.


Masážne Kreslo

Bočné panely

Príslušenstvo


Ovládací panel

Používateľská príručka a napájací kábel

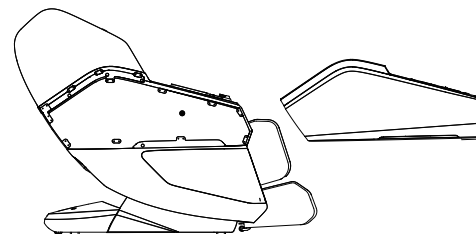

Tip
Príslušenstvo je zabalené v osobitných baleniach. Používajte príslušenstvo, ktoré je v balení.


Postup inštalácie pred použitím kresla

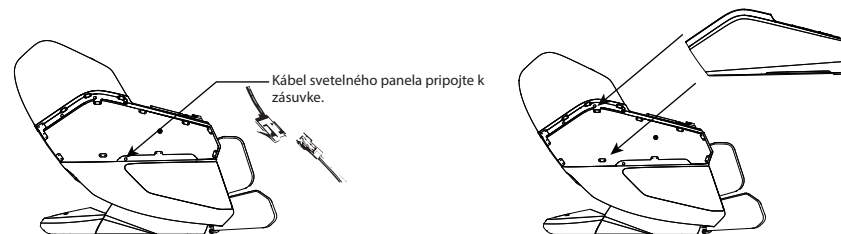

① Kábel svetelného panela pripojte ku konektoru.

② Zasuňte bočné obkladové panely do vyhradených drážok.

Postup inštalácie ovládacieho panela

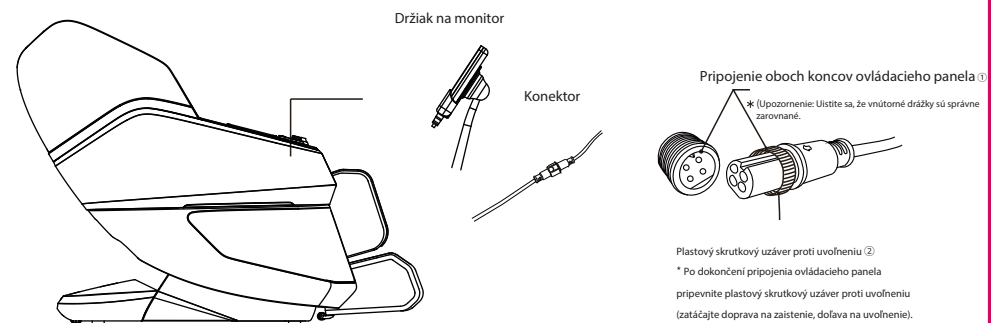


VI Údržba a metódy skladovania

Údržba




- Použite suchú handričku na utretie potu.
- Pri čistení škvŕn použite nízkokonzentrováný neutrálny čistiaci prostriedok.
- Navlhčíte jemnú handričku, dobre ju vyžmýkajte a jemne utrite masážne kreslo.

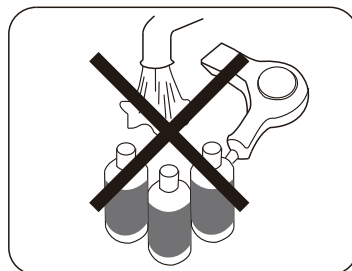

- Pri čistení masážneho kresla musí byť pripojenie na elektrinu odpojené. Okrem toho sa nedotýkajte napájacieho konektora mokrymi rukami.
- Nepoužívajte sušič na vlasy na sušenie potu na masážnom kresle.
- Nepoužívajte vodu na čistenie masážneho kresla.
- Nepoužívajte benzín, riedidlo, zásadité čistiace prostriedky, bielidlá a podobné látky.

Skladovanie

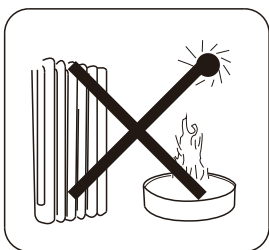

- Neumiestňujte kreslo na priame slnečné svetlo dlhší čas, aby ste predišli zafarbeniu alebo poškodeniu.
- Takisto ho nevystavujte vysokým teplotám, ako sú vykurovacie zariadenia a krby, aby ste predišli zafarbeniu alebo poškodeniu.

VII Pripojenie Bluetooth na prehrávanie hudby

Krok 1: Zapnite hlavný vypínač masážneho kresla.


Krok 2: Zapnite Bluetooth na vašom telefóne a vyhľadajte dostupné Bluetooth zariadenia.

Krok 3: Po vyhľadaní nájdite "NEDES massage1" v sekcii "Bluetooth zariadenia" a pripojte sa.


Krok 4: Otvorte na svojom telefóne aplikáciu na prehrávanie hudby a začnite prehrávať hudbu.

Tip


- ▶ Rôzne systémy mobilných telefónov môžu mať odlišné spôsoby pripojenia cez Bluetooth. Prosím, pripojte sa k Bluetooth podľa spôsobu pripojenia, ktorý je špecifický pre váš typ telefónu.

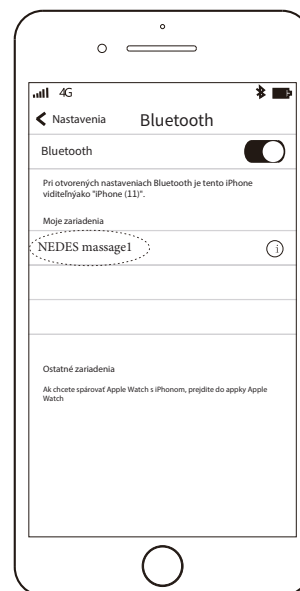

VIII Popis jednotlivých částí křesla

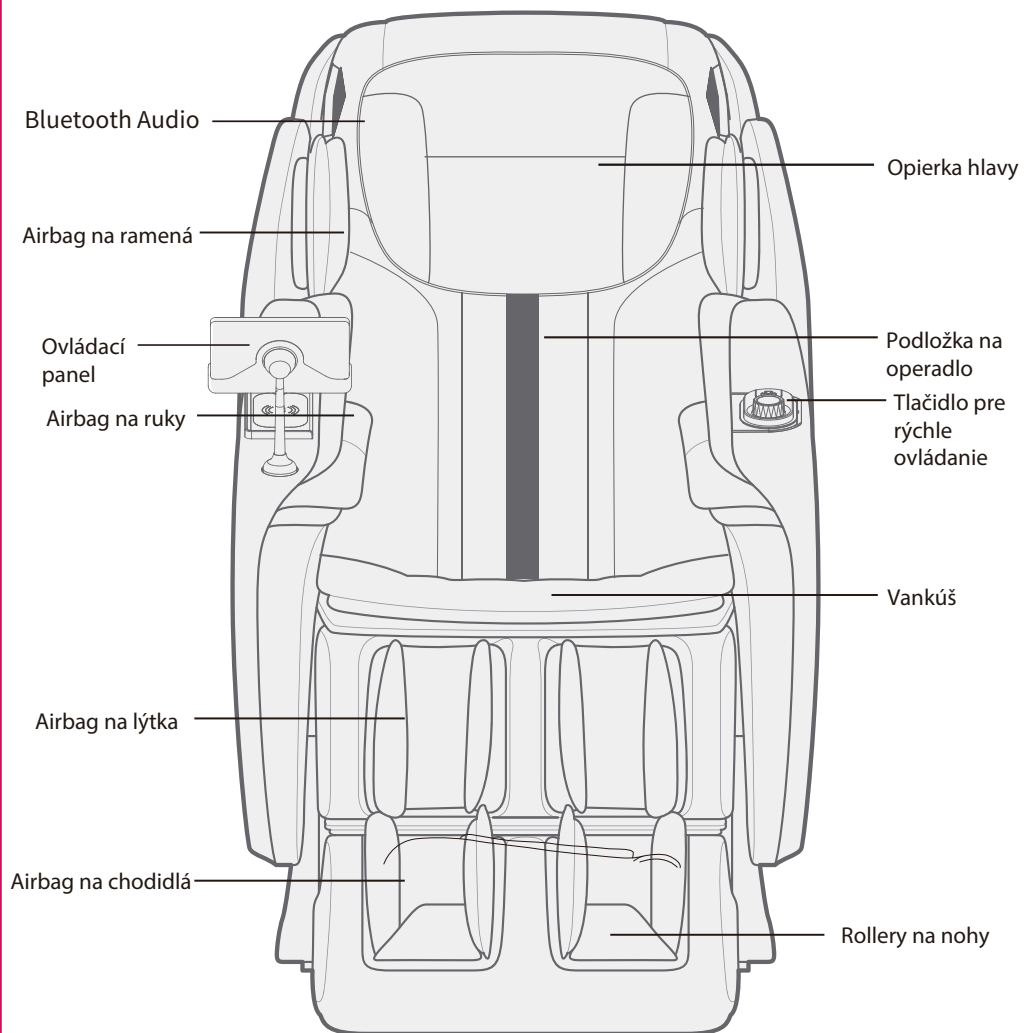

IX Ovládací panel

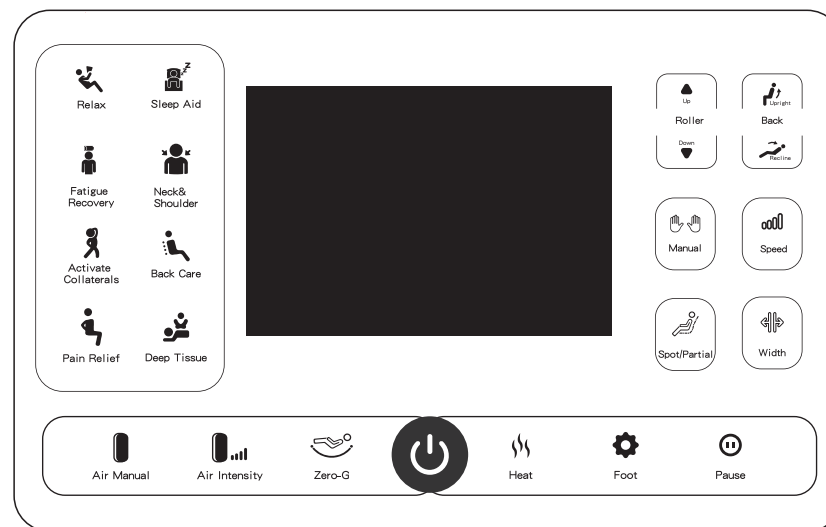

X Pokyny na obsluhu masážneho kresla

I. Prosím, venujte pozornosť nasledujúcim záležitostiam pri používaní tohto produktu:

1. Zapnite napájanie. Stlačte spínač na sedacej konštrukcii masážneho kresla do polohy "I". Masážne kreslo prejde do resetovacieho stavu. V tomto čase bude kreslo v pohotovostnom režime, pričom červené svetlo na tlačidle zapnutia/vypnutia bude svietiť stále.
2. V pohotovostnom režime je možné ovládať len nasledujúce funkcie: zapnutie/vypnutie, spätný chod, posun dozadu, zdvihnutie nôh, spustenie nôh a režim nulovej gravitácie.

II. Popis funkcií tlačidiel ovládacieho panela



On/Off Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla vstúpite do režimu spustenia a aktivujete automatický masážny program „Relax“.

Tlačidlá ôsmich automatických programov:

Relax	Sleep Aid	Fatigue Recovery	Pain Relief
Neck& Shoulder	Activate Collaterals	Back Care	Deep Tissue

Stlačením tlačidiel ôsmich automatických programov sa aktivuje predvolený čas 15 minút.



Masážna intenzita je jemná, zahŕňa celé telo, efektívne uvoľňuje telo a myseľ, podporuje krvný obeh a odstraňuje únavu.



Zmierňuje únavu a bolesť po celom tele, poskytuje úľavu pre chrbát a končatiny.



Zameriava sa na meridiány na zlepšenie mikrokrevného obehu v tele a posilnenie imunitného systému.



Pre osoby so sedavým zamestnaním, masáž zvyšuje množstvo telesného pohybu, uvoľňuje stres a zlepšuje funkciu tela.



Intenzita je jemná, vhodná pre ženy, využíva techniky hnetenia a akupresúry, kombinované s nízkotlakovou vzduchovou masážou. Pomocou akupresúrnych bodov pomáha telu regulovať rovnováhu a rýchlo zlepšiť spánok.



Unikátné masážne techniky pre ramená a krk pomáhajú podporiť krvný obeh a uľaviť od bolesti a napätia v oblasti krku a ramien.



Na základe kriviek ľudského tela sa masáž zameriava na oblasti chrbta a bedier, čím účinne uvoľňuje chrbticu.



Intenzívnejšia masáž s postupným uvoľňovaním celého tela účinne zmierňuje bolesť a odstraňuje únavu.



V manuálnom režime stlačením tohto tlačidla posúvate pohyb hore alebo dole.



V manuálnom režime stlačením tohto tlačidla sa zdvíha alebo spúšťa operadlo.



Stlačením tohto tlačidla prejdete do manuálneho režimu a prepínate masážne techniky. K dispozícii je šesť techník: hnetenie, poklepávanie, búchanie, akupresúra, hnetenie a klepanie, a perkusie. Ikony zobrazujúce techniky:



Tlačidlo na nastavenie intenzity masáže: Stlačením tohto tlačidla v manuálnom režime môžete upraviť rýchlosť masáže. Intenzita je nastaviteľná na úrovniach, pričom tretí stupeň predstavuje maximálnu intenzitu. (Poznámka: Intenzitu masáže je možné upraviť iba v manuálnom režime.)



Stlačením tlačidla Fix Point/Interval v manuálnom režime sa postupne prepína medzi režimami: fixovaný bod a intervalový cyklus.



Tlačidlo na nastavenie šírky pohybu umožňuje úpravu v štyroch manuálnych režimoch: prstová masáž / poklepávanie / búchanie / klepanie. Môžete nastaviť šírku pohybu na tri úrovne: široká, stredná a úzka.



Tlačidlo na nastavenie častí airbagov: Stlačením tohto tlačidla v manuálnom režime sa cyklicky prepína medzi airbagom na rukách, airbagom na ramenách, airbagom na nohách a chodidlách a vypnutím airbagu.



Tlačidlo na nastavenie intenzity airbagov: Stlačením tohto tlačidla v manuálnom režime sa cyklicky prepína medzi 1-3 úrovňami intenzity.



Tlačidlo Zero Gravity: Stlačením tohto tlačidla sa postupne nastavujú režimy nulovej gravitácie: 1. stupeň - 2. stupeň - vypnúť, v uvedenom poradí.



Tlačidlo Heat (Teplota): Stlačením tohto tlačidla v manuálnom aj automatickom režime sa zapína alebo vypína vyhrievanie.



Tlačidlo Foot Rollers (Rollery na nohy): Stlačením tohto tlačidla v manuálnom režime sa zapína alebo vypína masáž s rollerami na nohy.



Tlačidlo Pause (Pozastaviť): Stlačením tohto tlačidla sa pozastavia všetky akcie. Stlačením tlačidla znova sa opäť zapnú.